

ご使用方法



01 アタッチメントは電源オフ時に取り付ける

02 電源ボタンを長押しして電源オン、短押ししてモード変更

03 ダイヤルを時計回りでレベルUP、反時計回りでDOWN

04 電源ボタンを再度長押しして電源オフ

商品名 WAVEWAVE Fascial Release Gun Mirai
商品型番 WH51-01
商品素材 アルミニウム合金、ABS、シリコン
バッテリー容量 1050mAh 定格電源 DC5V/2A
サイズ 約149×67×32 mm 本体重量 282g
製造国 Designed in Japan . Made in China
発売元 有限会社セブンウェイブ

【商品同梱物】

本体×1台
アタッチメント(5種)
充電コード×1本
取扱説明書(保証書)×1部
品質合格書×1部



希望小売価格 13,200円(税込)

JANコード

ディーブ
ブラック



4570117548642

サンド
ゴールド



4570117548659

スチール
ブルー



4570117548666

ご使用の際は、使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

次のような医療機器と同時に使わないでください。

・心臓ペースメーカーおよびその他の埋め込み型医療用電子機器 ・人工心臓などの生命維持に役立つ医療用電子機器
・心電計などの装着型医療用電子機器

次のような方は使用しないでください。

・悪性腫瘍のある方 ・動脈瘤や出血の症状がある方 ・医療機関で治療中の方
・妊婦、産児 ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ・心臓疾患のある方、血栓のある方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

保証期間 お買い上げより12か月間

この保証書はご購入日から保証期間中、使用中に自然故障した場合、無償交換などを行うことをお約束するものです。故障が生じた場合は本製品、保証書、購入日が確認できる証明書(レシート、納品書など)をご用意の上、弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

発売元:有限会社セブンウェイブ

【本社】〒812-0036 福岡市博多区上呉服町11-16 TAKAI BLD 7F
https://7wave.jp Email:info@7wave.jp

(お客様相談窓口)

☎0120-711-011 受付時間/月～金 9:00～12:30 13:30～18:00(祝日を除く)

※このカタログの記載内容は2025年4月現在のものです。



HP

ボディ
ケア

頭皮
ケア


フェイス
ケア



未来のわたしを描く、
新・ボディケア

Fascial Release Gun Mirai



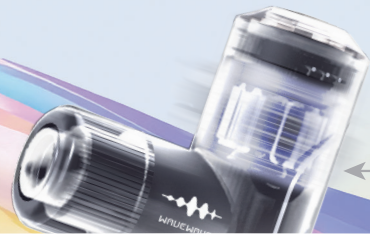

← mode1/2 motor

深く響く「超高速振動」や
休息を交えた「リズム振動」など
3つのモードを搭載。

使うほどにボディケアの可能性が広がり、
優秀さと面白みを感じられる、
次世代のGUNをぜひその手でご体感ください。

→ mode3 motor

ボディ 頭皮 フェイス 対応

デュアルモーター搭載で
3種の振動モードを実現！

全身ケアする
5つの
アタッチメント



アタッチメントは水洗いが可能です。再使用時はよく乾かしてからご利用ください

Model シンプルモード

ソフトもハードも楽しめる

フェイスクアもできる「レベル1」

肌あたりが優しく、
フェイスや頭皮ケア
に最適。ソフトケア
にご使用ください。


※フェイスはエアク
ッションアタッチメント、
モード1のレベル1だ
けでご使用ください



ソフトケア 支度時 休憩時 リフレッシュ マイルド

最大3100回転/分、大満足のハイパワー！

コンパクトサイズ
でも期待を超える
ハイパワー。局部に
振動がしっかり届く
設計で満足感抜群
です。

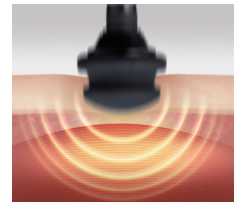


ボディケア 運動前後 強いコリ リフレッシュ

Model リズムモード

ありそうでなかったリズムカルな振動！

振動が止まることでケアしすぎを防ぐ

刺激の負担を減ら
し、休息を挟むことで
筋肉を優しくケア。
変化のあるリズムで
効率的にほぐします。

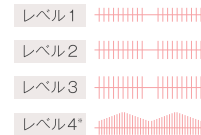

ボディケア 支度時 休憩時 リフレッシュ マイルド




Model3 ディープリリース モード

使用後、待つほどにほぐれる感覚

新感覚の超高速回転バイブレーション

心地よい振動が肩
や首にも優しくなじ
み、運動後やデスク
ワーク後の体をし
っかりリフレッシュ
します。

※画像はイメージです
※本体の持ち手側が
動きます

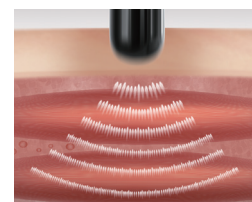

ボディケア 深いコリ 睡眠前 リフレッシュ マイルド



ピンポイントにほぐしたい
時には縦向きに当て
軽く撫でてください

まんべんなくほぐしたい
時には横向きに当て
軽く撫でてください

